

sVelta[®]

High Medical Technologies

Svelta IPL[®]

3 EN 1 IPL+SHR+Q-SWITCH

- IPL
- SHR
- Nd : Yag Laser

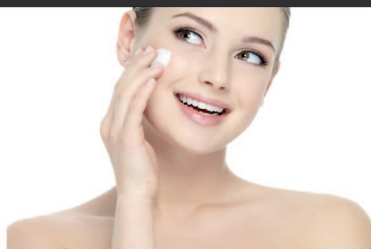


“Modèle Certifié CE Médical”

ZONES DE TRAITEMENT



Épilation



Rajeunissement de la peau



Thérapie vasculaire



Élimination de l'acné



Élimination des rides



Enlèvement de tatouage



Traitement pigmentaire



Peeling au carbone

Spécificités



Dernier système multifonction portable 3 en 1.

Puissance de sortie de 2000 W, haute énergie.

Peut résoudre tous les problèmes de peau, l'élimination des tatouages et le rajeunissement de la peau au carbone.

SHR, IPL, laser Nd : YAG tout en un.

Système de protection d'alarme pour le débit et la température de l'eau. Assurer un traitement sûr.







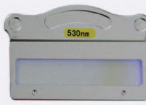

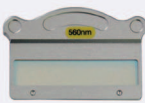



AVANTAGES

UK a importé la lampe Xe plus de 300000 flashes

Verre saphir pur, clignote 10 fois par seconde




- SHR/IPL manipuler
-- Épilation indolore

	430-1200 nm Acne treatment	
	480-1200 nm Vascular removal	
	530-1200 nm Pigment removal	
	560-1200 nm Wrinkle removal	
	640-1200 nm Hair removal	




TATTOO REMOVAL

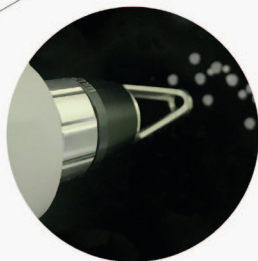Multi-color
removal




- Poignée laser Nd: yag
-- Enlèvement de tatouage

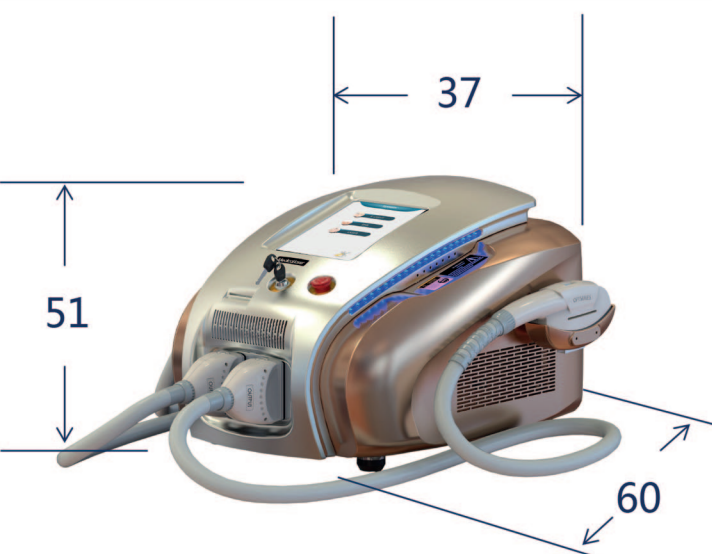Dimensions



Poids net: 30 kg

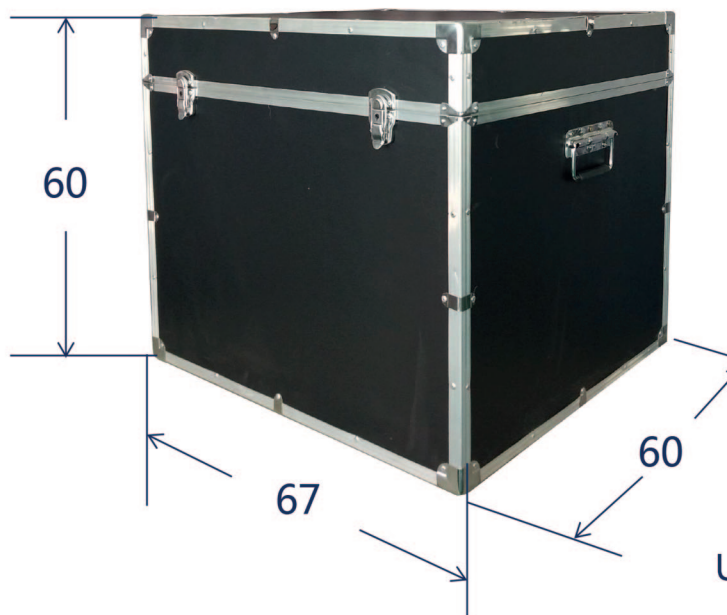

Poids total: 45 kg

Caractéristiques

Modèle	ML 300
Language	Français
Poignées	2 Poignées / Nd Laser YAG / SHR
SHR Energie	1-50J/CM2
SHR Fréquence	1-10HZ
Nd : YAG Energie	1-1000MJ
Nd : YAG Fréquence	1-6HZ
SHR Filtres	5 Filtres
Nd : YAG Laser Sondes	3 Sondes / 1064 mm / 532 mm / 1320 mm
Puissance de sortie	2500 W
Tension	110 V / 200 V

En Savoir +

Combien faut-il de séances pour un traitement ?

3 à 5 séances avec un intervalle de **28 jours** entre **deux traitements**.

Combien de temps d'un traitement ?

Habituellement, un traitement facial complet nécessite **30 minutes**. Pour la zone de traitement corporel, environ **30 à 60 minutes**.

Comment désinfecter et nettoyer la tête de trait ?

Nettoyez la tête d'abord à **l'eau** et ensuite à **l'alcool**, mettez-là dans une armoire de stérilisation pour la désinfection.

Comment appliquer le traitement ?

Habituellement une fois **point par point** et **deux fois** en **glissant** dans une zone de traitement.

Quelle est la distance entre la poignée Nd : YAG et la peau ?

Une distance de **deux à trois doigts**.

Combien de carbone dois-je mettre sur le visage pour le rajeunissement de la peau au carbone ?

Habituellement, une seule **couche mince suffit**, lorsque le carbone est **semi-sec**, vous pouvez commencer le traitement.

À quel type de tatouage peut-il faire face ?

Il a un très bon résultat de traitement sur le **Black & Blue** et les autres **tatouages colorés**.

Quelle est la séance de traitement ?

2-3 séances pour un traitement avec un intervalle de **20 à 40 jours** entre les séances.